

Microscopio BeaverLAB MX inteligente

Manual de instrucciones DDL-MX

Lea atentamente el manual prima dell'uso




Índice

1. Antepresentación del producto	01
2. Instrucciones para el uso	02
3. Instrucciones para el uso del microscopio	03
4. Instrucciones para los pasos operativos del microscopio	06
5. Guía de interfaz de usuario	11
6. Descripción de las funciones de los dispositivos externos	15
7. Accesorios y herramientas	26
8. Solución de problemas del microscopio	19
9. Marchi e dichiarazione legale	20
10. Instrucciones de garantía del producto	20
Parámetros generales del microscopio	


1 Anteprima del producto

- Gracias por haber adquirido el microscopio smart BeaverLAB, del siguiente denominado microscopio.
- Lea atentamente este manual y consérvelo correctamente prima dell'uso. No utilizar el microscopio senza aver letto le istruzioni.

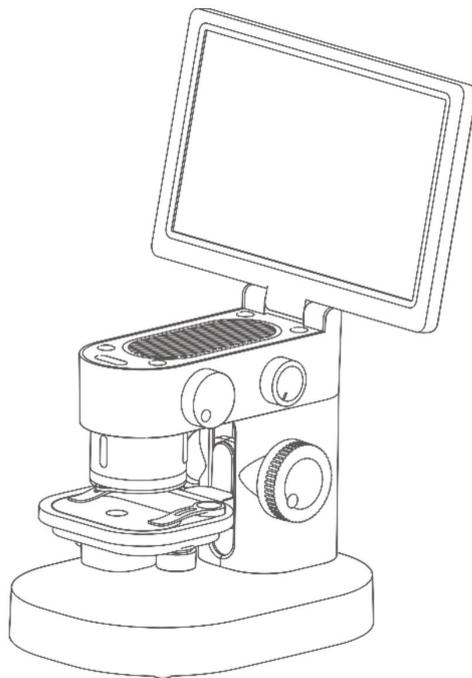

3 instrucciones para el uso del microscopio


Composición del microscopio

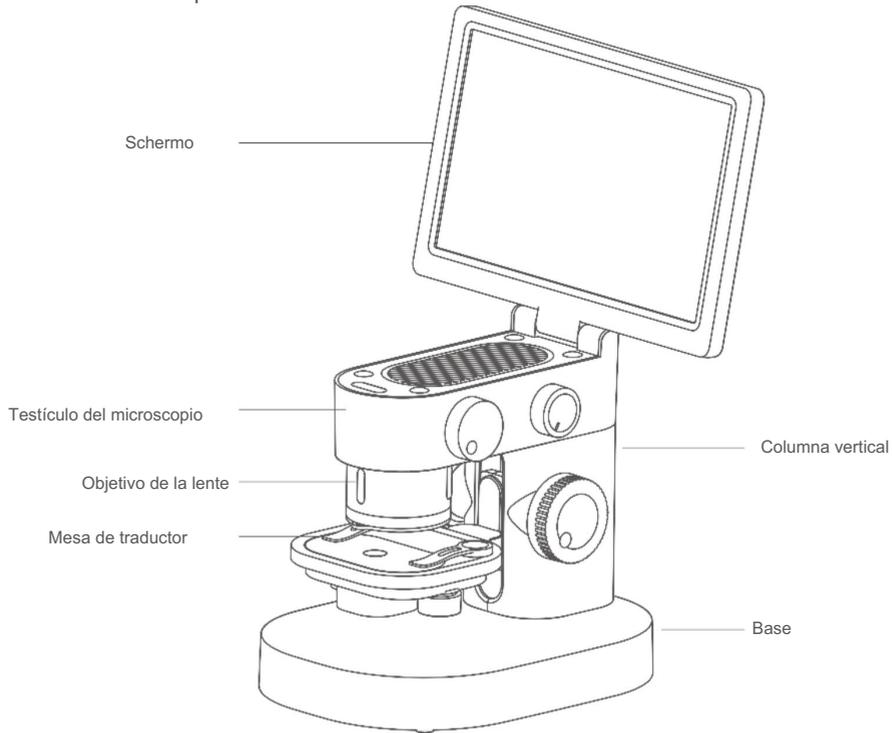

Descrizione de vite di messa a fuoco

Manopola de illuminación operativa

Ruotatela in senso orario per accendere ed aumentare la luminosità; ruotatela in senso antiorario per diminuire la luminosità e spegnere.

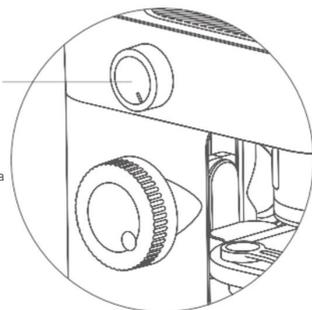


Vite di regolazione ingrandimento

Amplificaciones 100 X / 600X / 1200 X

Manopole di regolazione movimento piattaforma

Ruotate in senso antiorario per spostare la piattaforma indietro

Ruotate in senso orario per spostare la piattaforma in avanti

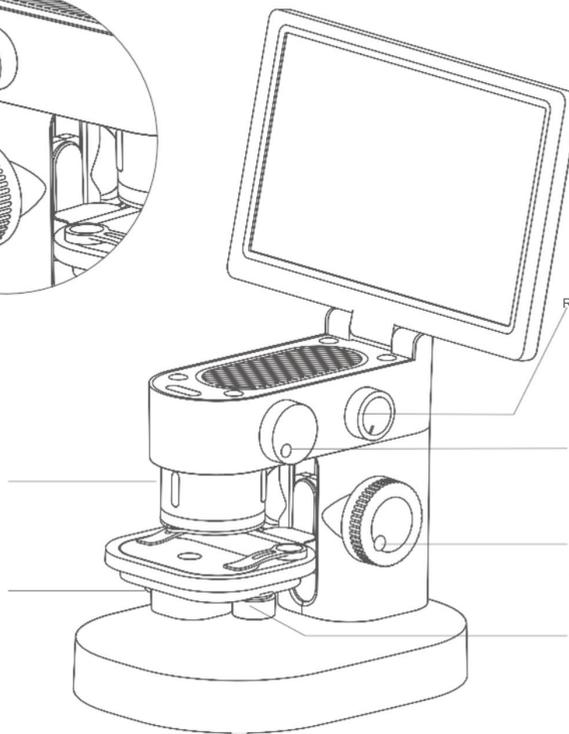

Manopola de iluminación intensificadora de regulación inferior

Ruotate in senso orario per accendere, in senso antiorario per spegnere.

Manopola di messa a fuoco micrometrica

Zoom indietro in sentido orario / zoom avanti in sentido antiorario

Manopola di regolazione sollevamento piattaforma

Abbassa in sentido antiorario, alza in sentido orario

Manopole di regolazione movimento piattaforma

Ruotate in senso antiorario per spostare la piattaforma a sinistra

Ruotate in senso orario per spostare la piattaforma a destra


Guía del usuario para la interfaz



Ambiente operativo




Utilizalo
microscopio en
ambiente con
Temperatura entre
10° y 45°C

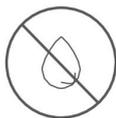


Evite dañar el microscopio
con agua, derrames o corrosión
de líquidos



Tenete el microscopio largo
de las fuentes de
calore, fiamme libere, gas
esplosivi od
inflamabili.

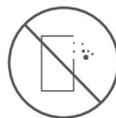


Evite que la suciedad entre en el
interior del microscopio o su lente.

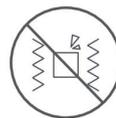


Evitalo
microscopio
venga urtato o
colpito.

- A baja temperatura, la capacidad operativa de la batería puede resultar ridotta.
- En caso de comportamiento anómalo del microscopio, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. El montaje del microscopio sin autorización puede causar daños irreversibles y comprometer la garantía.

Instrucciones de carga

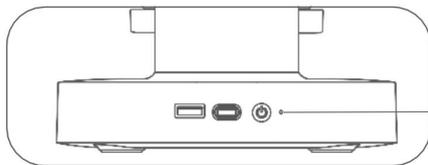

La luce rossa è sempre accesa durante la ricarica e la luce verde è sempre accesa dopo la ricarica.

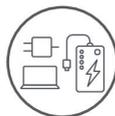

Es posible utilizarlo
Caricaturista del propio
teléfono inteligente para recuperarlo
microscopio



No caricare per più di 12 ore
para evitar comprometerse
duración de la batería.


- Durante la ricarica es posible notar un ligero calor en el cuerpo e nella batteria del microscopio; Este comportamiento es del todo normal.

Condiciones de conservación


- Riponete il microscopio in a luogo fresco ed asciutto per l'uso quotidiano, evite la esposizione a la luz solar.
- Evitate di riporre il microscopio in luoghi in cui vi è rischio di caduta, che possano causare danni all'obiettivo o al microscopio, nonché altri danni irreparabili.

4 instrucciones para el uso del microscopio


1. Coloque el microscopio en una superficie estable.

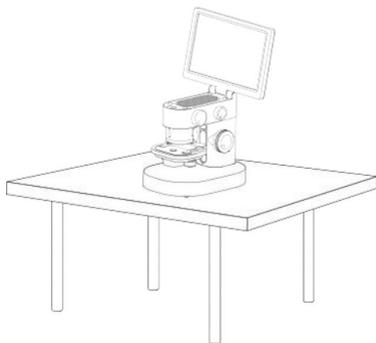

2. Abra la pantalla

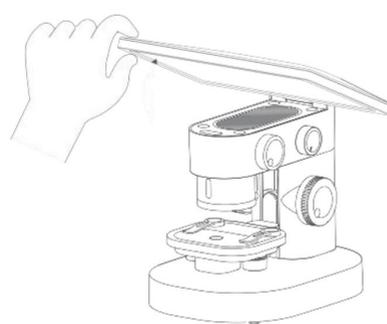


3. Premete il tasto di accensione per
acendere il microscopio

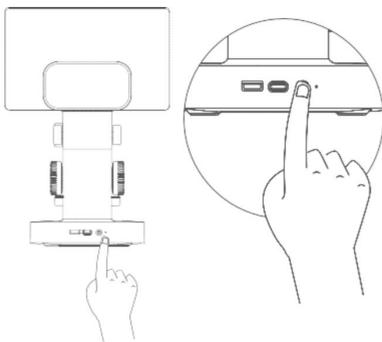

4. Regolate la posición de la plataforma




5. Rimuovete il copriobiettivo e inserite i campioni per l'osservazione (il campione deve essere rivolto verso l'obiettivo)

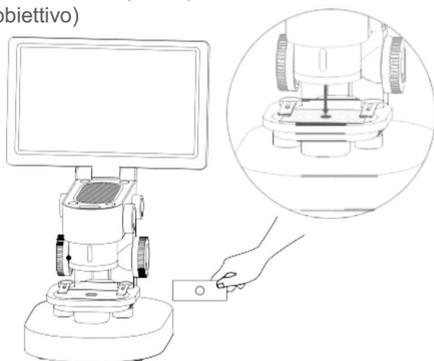


6. Seleccionar el ingreso al quale osservare (il campione deve essere rivolto verso l'obiettivo)




7. Posizionate la piattaforma ad un'altezza adeguata

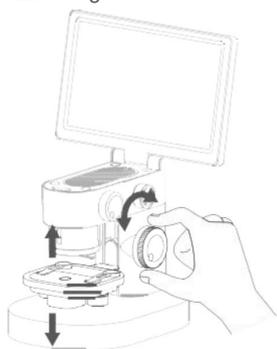


8. Regolate l'intensità dell'illuminazione inferiore superiore

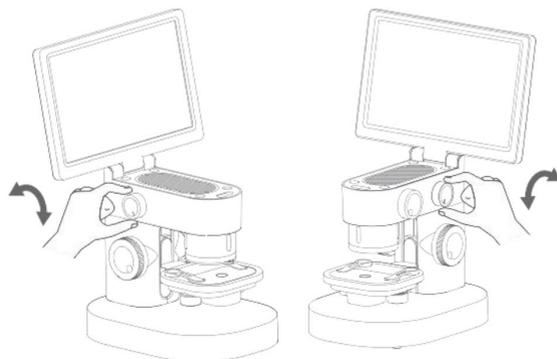

9. Mettete a fuoco attraverso la manopola di messa a fuoco ed osservate lo schermo del microscopio

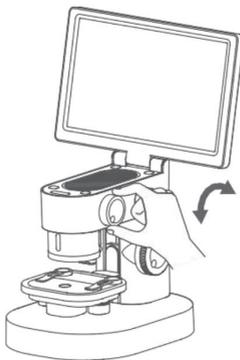


10. La posición de observación puede ser variable regulando el manopole móvil bajo la plataforma.

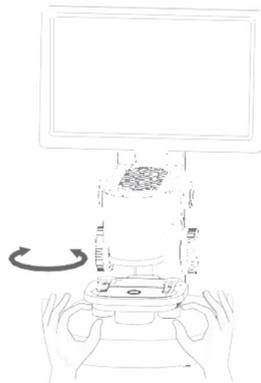

Fórmula concisa para el uso del microscopio: Ingrandimenti elevati richiedono che il campione sia molto vicino all'obiettivo del microscopio, gli ingrandimenti minori richiedono una certa distanza da esso. La messa a fuoco macrometrica dipende dal sollevamento del carrello, la regolazione fine dipende dalla manopola anteriore.

Uso de la ferma vetrini

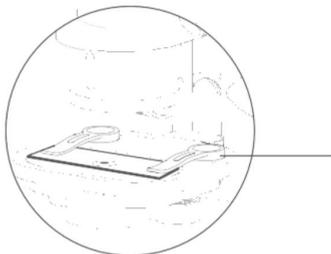


Clip de fissura de vetrini

Campione fisso o obiettivo dell'osservazione

Questioni che richiedono attenzione:

- El clip fornite suena de tipo magnético y funciona solo se posiciona correctamente en sus relaciones relativas.
- El fondo y la base del clip de fijaje del campione deben ser pulidos regularmente para evitar la absorción de otras sustancias metálicas.

Uso del panel de observación

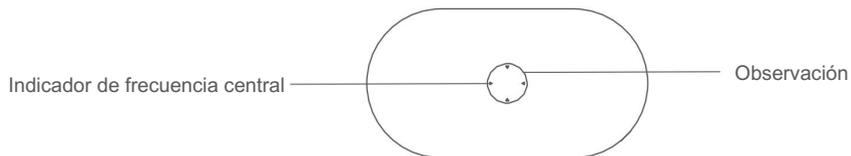

Questioni che richiedono attenzione:


Il pannello di osservazione deve essere pulito regolarmente per evitare macchie d'olio o altre macchie che influiscano sull'esperienza di osservazione.

Descrizione de la función de ajuste de la luz de la ventana de observación

La luce di colore diversa può comportare una resa cromatica diversa al campione; una resa cromatica appropriata avrà un migliore effetto sulle osservazioni.

5. Guía de interfaz de usuario

Introducción a todas las funciones del software de interfaz:

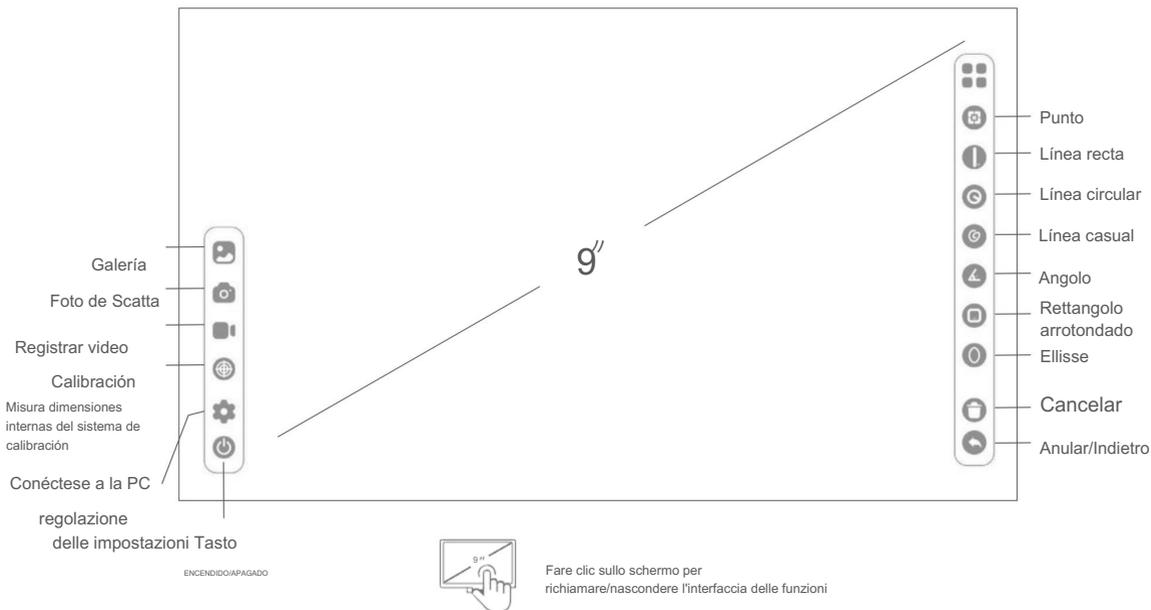

Galería

Osserva, sfoglia e modifica le immagini e video.



Foto de Scatta

Scatta foto del campione attualmente osservato



Registrar video

Riprendi un video del campione attualmente osservato



Calibración

Misura le dimensioni interna del sistema di calibrazione



Configuraciones

Idioma: chino/inglés

Ora :ora/data Modalità Dormir: mai/3 min/5 min/10 min/15 min

Spegnimento temporizzato: mayo/5 min/10 min/ 30 min / 1 hora

Tarjeta de conmutación de memoria: entrada/uscita

Conmutación de cámara fotográfica: entrada/salida

Selección de color: blu, verde, rosso, giallo, viola



Espegnimento

Escribir el dispositivo



Griglia

Individual en el punto central de la imagen



Línea Dritta

Misura la lunghezza dell'oggetto di osservazione



Línea circular

Misura S (área dell'intervallo selezionato) C (lunghezza della circonferenza) y D (diámetro)



Línea casual

Etiquetado



Angolo

Misura l'angolo dell'oggetto di osservazione



Rettangolo arrotondato

Misura s (área) c (perimetro) dell'intervallo selezionato



Ellisse

Misura s (área) ed (diámetro) dell'intervallo selezionato



Cancelar

Eliminar todas las dimensiones en la interfaz



Anular/Indietro

Anular la acción precedente

6 Descripción de las funciones de los dispositivos externos

Conexión a un teléfono inteligente

Alcance:

Guarde las imágenes en la memoria del microscopio con el celular o copie el celular.

Método operativo:

Collega il cavo dati alla porta di ricarica DC5V del microscopio MX, collega l'adattatore all'estremità del telefono cellulare y collegare il cavo dati con l'adattatore. Abra el microscopio MX y haga clic en:

Impostaizoni → Commutazione della scheda di memoria(Cambio de tarjeta de memoria) → Ritaglia in sequenza (Cortar en secuencia). A quel punto lo schermo si oscurerà.



Abril del celular → abril Administrador de archivos. A este punto podrá ver un dispositivo de archivo USB. Después de la apertura, podrá ver todas las imágenes en la memoria del microscopio MX.

- Conexión a una computadora

Visite www.dangdangli.com Descargue e instale el paquete de instalación del software

Alcance:

Collegati direttamente al ordenador, utilizza il software del ordenador para observar y operar y lo más grande.

Operaciones:

Collega il cavo dati alla porta di ricarica DC5V del microscopio MX y collega un'estremità all'interfaccia USB del ordenador.

Abra el software para computadora BeaverLAB (solo es compatible con una computadora con sistema operativo Windows).


Abra el microscopio MX y haga clic en:

Impostazioni → Cambio de cámara (Cambio de cámara) → Ritaglia (Recorte). A quel punto lo schermo si oscurerà.




El software del ordenador hace clic en el botón Connetti Dispositivo


- selección del dispositivo (selección de la cámara de fotos rica)
- abril

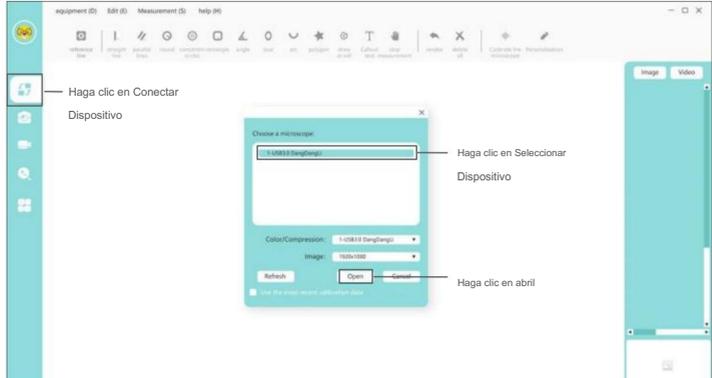

En este punto, el software de la computadora está directamente conectado a la cámara fotográfica, por lo que es posible utilizar la computadora para guardarla directamente.

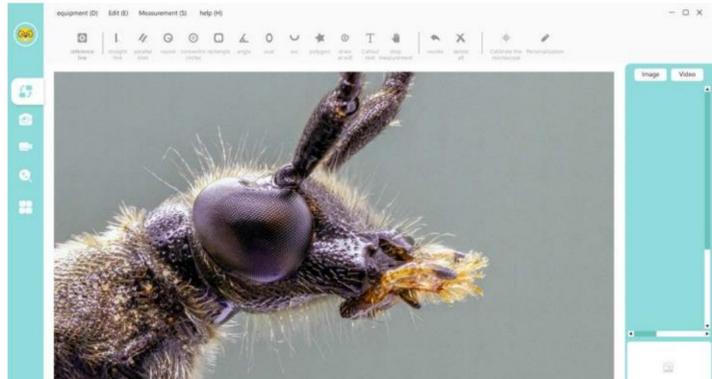

7 Accesorios y herramientas

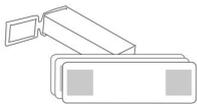

10x preparaciones de verduras



Adaptador



Cavo de datos



2x clip de fijación de vetrini

8 Solución de problemas del microscopio

Problema de riscontro	Exploración	Solución
Il microscopio si surriscalda durante la fase de ricarica	Durante la rica, la corrente ed il potere calorifico della batteria sono elevati; Este fenómeno es normal.	Comportamiento en la norma
Il sollevamento del carrello non è fluido/impossibile muovere il carrello	Il meccanismo interno del carrello potrebbe essere danneggiato	Enviar en asistencia
No es posible regular la iluminación	Scheda circuito dell'illuminatore danneggiata/Scheda circuito della lampada danneggiata	Enviar en asistencia
Non è possibile effettuare la ricarica	Il cavo di alimentazione non è perfettamente inserito Il cavo di alimentazione non è collegato Guasto del sistema de alimentación	Verificare il collegamento del cavo di ricarica Collegare il cavo di alimentazione Inviare in Assistenza

El dispositivo no puede usarse normalmente	Danni interni alle apparecchiature dovuti a spruzzi d'acqua, urto o altri motivi	Inviare in Assistenza* I danni causati da uso improprio non sono coperti da garanzia
El dispositivo no puede estar conectado al software de la computadora	El cavo no è collegato correttamente, el cavo è danneggiato o la linea de collegamento con la función de transmisión de datos no está activada	Collegate correttamente il cavo, restituite il cavo, activa la función de transmisión de datos y effettuate il collegamento.
L'obiettivo mostra immagini sfuocate	La temperatura e la humedad dell'aria possono causare un lieve alone sull'obiettivo della lente	Asegúrese de que la temperatura se establezca y utilice el microscopio dos veces solo y comparándolo.
Ci sono corpi estranei nel campione e l'osservazione non è chiara	La superficie del campione è sporca, y el panel es deportivo	Pulir la superficie del campo y la superficie del panel de conservación
El cuerpo del microscopio está roto e incrinado a causa de una caduta.	Danno causato da uso improprio	Il danno causato da use improprio non è coperto da garanzia
El microscopio no se clava	Microscopio en bloque	Restablecer el microscopio y el riaccendolo

9 Marchio e dichiarazione legale



" "BeaverLAB" es un mercado depositado y registrado en China Continental da Beaver Culture y Innovation Tehnology (Shenzhen) Co., Ltd. y puede utilizario solo en este producto.

Sen el permiso del propietario del marchio, ninguna persona o institución puede utilizar el logo del marchio sopra riportato su merci non approvate senza autorizzazione. Este manual es una publicación creada por Beaver Culture and Innovation Technology (Shenzhen) Co., Ltd tiene derechos de autor, ninguna organización del individuo puede copiar

o distribuire tutto o parte di este manuale sin autorización.

A causa del continuo cambio de funciones del producto, modificación del diseño y otros motivos, este manual potrebbe non essere aggiornato con i prodotti acquistati. Si prega di considerare i prodotti descritti vienen de serie.

Norma ejecutiva del producto: GB 4943.1-2011 GB/T 9254-2008

10 Descripción de la garantía del producto

1. Periodo de garantía, Servicio de Asistencia Técnica, Límites de la Garantía

AURIGA fornisce 24 mesi di garanzia per difetti nei materiali/lavorazione/funzionamento sul normale use of prodotto. La durata della garanzia ha decorrenza dalla data indicata sulla prova di acquisto.

Per domande sul funzionamento dei prodotti siete pregati di contattare il nuestro servizio di Assistenza Tecnica all'indirizzo tecnico.ottica@auriga.it.

Límites de garantía:

- Manutenzione non autorizzata use improprio, cadute, negligenza, abusi, inclusione di liquidi, incidenti, altre operazioni improprie, alterazione di etichette/segni anticounterfeiting;
- Terminación del periodo de garantía;
- Danni causati da forza maggiore;
- Decadimento delle prestazioni del prodotto e dei suoi accessori a causa di motivi umani;

Parámetros generales del microscopio

Marca del microscopio:	Laboratorio de castores
Nombre del microscopio:	Microscopio inteligente BeaverLAB MX
Modelo:	DDL-MX
Color:	Gris/Blanco/Amarillo
Capacidad de la batería:	3500 mAh
Materiales de composición:	ABS + PC

Microscopio BeaverLAB Smart MX

Nombre del producto: Microscopio inteligente BeaverLAB

Modelo: DDL-MX

Tamaño del producto: 214x224x324mm

Voltaje de entrada: DC5V

Capacidad de la batería: 3500 mAh

Pantalla de medición: 9"

Nombre de marca: BeaverLAB

Norma ejecutiva: CE FCC

Fabricante: Beaver Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

Consulte el sitio web oficial de BeaverLAB para obtener información adicional sobre este producto: www.dangdangli.com